

CELLULESS MD
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Cellulless MD είναι πολύ εύκολο στην χρήση. Ακολουθώντας τις οδηγίες, το Cellulless MD θα γίνει μέρος της καθημερινής φροντίδας της επιδερμίδας σας. Χρησιμοποιήστε το Cellulless MD για μερικά λεπτά, για άμεσα, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάνετε μασάζ σε διάφορες περιοχές του σώματός σας για 5 με 10 λεπτά κάθε μέρα για να ανακτήσετε την σφριγηλότητα και την απαλότητα του δέρματός σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή αν υποφέρετε από κάποια πάθηση ή αν ακολουθείτε κάποια θεραπεία.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση και έχει σχεδιαστεί μόνο για μασάζ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη βάλετε στην πρίζα.
- Προτείνουμε να λειτουργήσετε τη συσκευή σε χαμηλή ταχύτητα/ένταση αρχικά και μετά σταδιακά να αυξήσετε την ταχύτητα/έντασή του.
- Μην κάνετε μασάζ σε μια συγκεκριμένη περιοχή για πάνω από 10 λεπτά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορούν να την φτάσουν τα παιδιά και να παίξουν μαζί της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν πάσχετε από κηρούς, αν έχετε ελιές ή πληγωμένο δέρμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Cellulless MD για δύο μήνες μετά από επέμβαση ή αρτηριακή εγχείριση.
- Μην χρησιμοποιείτε το Cellulless MD αν υποφέρετε από θρόμβωση ή αν ακολουθείτε κάποια θεραπεία.
- Αν πάσχετε από κάποια σοβαρή ασθένεια, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το Cellulless MD κοντά σε νερό ή με βρεγμένα χέρια.
- Σταματήστε την χρήση αμέσως αν νιώσετε δυσφορία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε εμφανείς εκδορές ή τραυματισμούς του δέρματος.
- Αποφύγετε να περνάτε τη συσκευή πάνω από τον αφαλό. Αν το στομάχι σας είναι σκληρό και καυτό, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια ερυθρότητα στο δέρμα σας, εκεί όπου εφαρμόσατε τη συσκευή – αυτό είναι φυσιολογικό και πρόσκαιρο.
- Αν το Cellulless MD φαίνεται ότι έχει πάθει βλάβη, μην επιχειρήσετε να το ανοίξετε ή να το επισκευάσετε. Οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από τον κατασκευαστή ή έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ Η ΘΗΛΑΖΕΣΤΕ. Όπως με όλες τις συσκευές μασάζ, άτομα με ειδικές ιατρικές ανάγκες θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν τη συσκευή αυτή.
- Προσοχή: Λόγω της αναρρόφησης, μερικά άτομα μπορεί να παρατηρήσουν μικρά σημάδια στις περιοχές όπου εφαρμόσαν τη συσκευή που θα φθίνουν μέσα σε μερικές ώρες/ημέρες.

Χαρακτηριστικά:

- Φορητό και εύκολο στην χρήση.
- Ίδανικό για τους βραχίονες, την κοιλιά, την πλάτη, τους γοφούς, τους μηρούς και τις γάμπες.
- Εναλλασσόμενες κεφαλές με κυλίνδρους.
- Αναρρόφηση που ποικίλλει για βαθύ μασάζ.
- Τονώνει τους μυς και ελευθερώνει την ένταση.

Προτεινόμενες χρήσεις:



Οφέλη:

- Εξομαλύνει ορατά το δέρμα.
- Αδυνατίζει, εξομαλύνει και σμιλεύει το σώμα.
- Δίνει στο δέρμα λάμψη και ομοιόμορφη απόχρωση.
- Δεν έχει τις παρενέργειες των επεμβάσεων και των ενέσεων.
- Βοηθά στη βελτίωση και τη σύσφιξη του χαλαρού δέρματος.

Το Cellulless MD περιλαμβάνει:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Εργονομική συσκευή Cellulless MD | A |
| 1 Εργονομική κεφαλή με δύο κυλίνδρους | B |
| 1 Εργονομική κεφαλή με έναν κύλινδρο | C |
| 1 Μετασχηματιστή AC/DC 110/220 V | D |
| 1 Βάση οργάνωσης/φορτιστή | E |
- Οδηγίες χρήσης



Τρόπος χρήσης:



1. Για καλύτερα αποτελέσματα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το Celluless MD με Έλαιο Κίτρου, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται στο δέρμα πριν από κάθε χρήση.
2. Βάλτε το φιλτράκι στην πρίζα (1). Βεβαιωθείτε ότι τα βολτ που αναγράφονται στο μετασχηματιστή (2) ανταποκρίνονται σε αυτά της οικιακής εγκατάστασης.
3. Ελέγξτε το διακόπτη στο πλάι (3) του προϊόντος είναι στη θέση ON ή OFF. Όταν είναι στο ON, το ΚΟΚΚΙΝΟ φωτάκι φόρτισης (4) θα πρέπει να είναι αναμμένο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει τη συσκευή τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την χρήση, ή να το χρησιμοποιείτε όταν είναι στην πρίζα (1). (Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στη βάση (5), το φως της βάσης (6) θα ανάψει, όπως και το ΚΟΚΚΙΝΟ φως (4) της συσκευής).
4. Αφού φορτίσετε τη συσκευή, επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή μασάζ για το σημείο του σώματος που θέλετε να κάνετε μασάζ, (7) Για μικρές περιοχές του σώματος, όπως βραχίονες, στομάχι, πλάτη και γάμπες, (8) Για τα πόδια, την κοιλιά, τους γοφούς και τους μηρούς.
5. Για να αλλάξετε την κεφαλή μασάζ, απλά στρέψτε (9) την κεφαλή για να βγει και να μπει.
6. Για βαθύτερο μασάζ, αυξήστε ή μειώστε την ταχύτητα αναρρόφησης (10) μέχρι να βρείτε μία θέση ευχάριστη για το δέρμα σας.
7. Αν η κεφαλή δεν γλιστρά ενώ κάνετε μασάζ, βεβαιωθείτε ότι πιέσατε το πλήκτρο ελευθέρωσης δύναμης (11).
8. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

Τεχνικές μασάζ με το Celluless MD:

Για κάθε περιοχή μασάζ, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με το Celluless MD πρώτα και πάντα να θυμάστε να κάνετε μασάζ προς την κατεύθυνση της καρδιάς. Μετά από κάθε κίνηση μασάζ προς τα πάνω, πιέστε το πλήκτρο ελευθέρωσης δύναμης και μετά ξεκινήστε την επόμενη κίνηση.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε και να εξοικειωθείτε με το επίπεδο έντασης αναρρόφησης και να βρείτε την ταχύτητα με την οποία νιώθετε άνετα.

Αν θέλετε να κουράρετε αρκετά σημεία του σώματός σας, πάντα να ξεκινάτε από το πάνω σημείο που θέλετε να κουράρετε και μετά να συνεχίζετε προς τα κάτω. Με την κίνηση που υποδεικνύετε και ενώ σέβεστε τους χρόνους, χρησιμοποιήστε τη συσκευή κάθε δεύτερη μέρα μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Μετά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάθε δεύτερη εβδομάδα για να διατηρήσετε τη φιγούρα σας.



ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ: 5-8 λεπτά




ΚΟΙΛΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ: 5-8 λεπτά



ΠΛΑΤΗ
ΧΡΟΝΟΣ: 5-8 λεπτά



ΓΟΦΟΙ
ΧΡΟΝΟΣ: 5-8 λεπτά

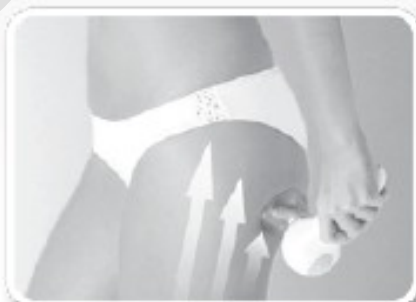

ΜΗΡΟΙ
ΧΡΟΝΟΣ: 5-8 λεπτά



ΠΟΔΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ: 5-8 λεπτά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

- Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιήστε μόνο και φορτίστε τη συσκευή με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή.
- Μην βυθίζετε το Cellulless MD σε νερό.
- Καθαρίστε τις κεφαλές και τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για την προτεινόμενη χρήση του, όπως αυτή περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται ως υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν υπ' ευθύνη σας. Θα πρέπει να επιβλέπετε στενά το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, από ή σε άτομα με αναπηρίες. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν πονάτε ή αν είστε έγκυος. Μην κάνετε μασάζ σε οποιαδήποτε περιοχή είναι πρησμένη, ερεθισμένη ή καλυμμένη με εξανθήματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Είσοδος: 230 V

Συχνότητα: 50 Hz

Έξοδος: 10 W

Τεχνικές προδιαγραφές μετασχηματιστή:

Μοντέλο: YL-41-045800D

Είσοδος: 230 V

Συχνότητα: 50 Hz

Έξοδος: 800 mA