


POWER FLOSS

Οδηγίες Χρήσης

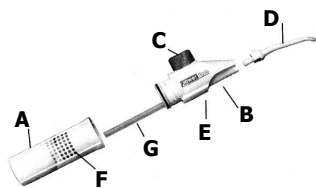

- A) Ρεζερβουάρ
- B) Θήκη αντλίας
- C) Κουμπι
- D) Μύτη
- E) Αεραγωγός
- F) Σημείωση για το ύψος του νερού
- G) Σωλήνας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Το Power Floss συμπληρώνει τη χρήση της οδοντόβουρτσας και βοηθάει στη μείωση της πλάκας και των υπολειμμάτων τροφής από τα δόντια, τις γέφυρες ή τις οδοντικές εφαρμογές. Διαθέτει το πλεονέκτημα ότι κάνει μασάζ και προωθεί την κυκλοφορία του αίματος στα ούλα. Το Power Floss δεν προορίζεται για καμία άλλη χρήση.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η μύτη είναι σωστά συνδεδεμένη με τη θήκη της αντλίας.

- 1) Κρατώντας τη συσκευή όρθια, στρίψτε ελαφρά το ρεζερβουάρ με φορά αντίθετη από τους δείκτες του ρολογιού και χωρίστε τα.
- 2) Γεμίστε το ρεζερβουάρ με νερό μέχρι τη γραμμή με τις τελείες που βρίσκεται στο εξωτερικό του ρεζερβουάρ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα στοματικά διαλύματα αλλά πρέπει να διαλυθούν στο νερό μέσα στο ρεζερβουάρ. Βλ. το τμήμα για τα Στοματικά διαλύματα.
- 3) Επανατοποθετήστε τη θήκη της αντλίας βάζοντας την μέσα στο ρεζερβουάρ και στρίβοντας ελαφρά προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- 4) Κατά την πρώτη χρήση αν το νερό δεν κυλάει μέσα στη μύτη, αποσυνδέστε το ρεζερβουάρ και βυθίστε τη θήκη της αντλίας, το σωλήνα και τη μύτη μέσα σε νερό και πατήστε το κουμπι μερικές φορές. Αυτό θα λιπάνει την αντλία και θα επιτρέψει στο νερό να κυλήσει.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER FLOSS

- 1) Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας (όπως στο διάγραμμα) ή τον δείκτη πάνω από το κουμπι.
- 2) Να κρατάτε πάντοτε το Power Floss σε μια σχεδόν όρθια θέση όταν το χρησιμοποιείτε, για να διασφαλίσετε την σωστή λειτουργία του.



- 3) Πατήστε το κουμπι αρκετές φορές μέχρι το νερό να αρχίσει να βγαίνει σταθερά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και τον όγκο του νερού ανάλογα με την πίεση που θα ασκείτε στο κουμπι. Πειραματιστείτε χρησιμοποιώντας διαφορετικά επίπεδα πίεσης στο κουμπι και μεταβάλλοντας την κλίση του Power Floss καθώς το μετακινείτε ανάμεσα στα δόντια σας.
- 4) Για να καθαρίσετε ανάμεσα στα δόντια: τοποθετήστε τη μύτη απέναντι από τα δόντια στη γραμμή των ούλων, έπειτα κλείστε το στόμα γύρω από τη μύτη και πιέστε το κουμπι. Χρησιμοποιήστε το στο μπροστά και στο πίσω μέρος των δοντιών, συνεχίζοντας όσο χρειάζεται ώστε να απομακρύνετε τα κατάλοιπα της τροφής.
- 5) Για να καθαρίσετε τις γέφυρες και τα εμφυτεύματα: τοποθετήστε τη μύτη κάτω από τη γέφυρα ή το εμφύτευμα και πατήστε το κουμπι. Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρίστε κάθε σημείο από πολλές γωνίες αν αυτό είναι εφικτό.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ POWER FLOSS

- 1) Μετά από κάθε χρήση αδειάστε το ρεζερβουάρ και αποσυμπέστε το κουμπι για να αφαιρέσετε όσο υγρό έχει απομείνει μέσα στη μύτη.
- 2) Για λόγου υγιεινής μη μοιράζετε το Power Floss με άλλα άτομα.
- 3) Αποθηκεύστε το Power Floss σε ένα ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν θα καταστραφεί.
- 4) Όταν ταξιδεύετε αποθηκεύστε τη μύτη μέσα στο ρεζερβουάρ. Βάλτε τη μύτη μέσα στην τρύπα, στο κάτω τμήμα της θήκης της αντλίας έτσι ώστε η μύτη να κρέμεται προς τα κάτω δίπλα στον σωλήνα τροφοδότησης της αντλίας.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Εντίνετε τα πλεονεκτήματα του Power Floss διαλύοντας οποιοδήποτε στοματικό διάλυμα με νερό (1 μέρος στοματικό διάλυμα σε 5 μέρη νερό) στο ρεζερβουάρ. Αυτό βοηθάει το στόμα να δροσιστεί, μειώνει τις οσμές ενώ οι αντισηπτικές ιδιότητες του στοματικού διαλύματος βοηθάει στη φροντίδα των ούλων και εμποδίζει την εξασθένηση των ούλων. Μετά τη χρήση του στοματικού διαλύματος καθαρίστε τη συσκευή καλά με ζεστό νερό. Αυτό εμποδίζει το οινόπνευμα που μπορεί να εμπεριέχεται στο στοματικό διάλυμα να αντιδράσει με το πλαστικό και να κάνει πιο εύθραυστο και εμποδίζει την αντλία να μπλοκάρει αν το στοματικό διάλυμα είναι πολύ παχύρρευστο.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την πρώτη χρήση του Power Floss μπορεί το νερό να μην τρέχει μέσα από τη μύτη. Αυτό συμβαίνει γιατί το λιπαντικό της αντλίας έχει προσωρινά στεγνώσει. Για να τρέξει το νερό ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Χωρίστε το ρεζερβουάρ από τη θήκη της αντλίας
2. Γεμίστε μια λεκάνη μέχρι το μισό με νερό.
3. Βυθίστε εντελώς τη θήκη της αντλίας/σωλήνα και τη μύτη στο νερό.
4. Όσο βρίσκεται κάτω από το νερό πιέστε το κουμπι 6-7 φορές. Το νερό θα πρέπει να τρέξει και το Power Floss είναι έτοιμο για χρήση.